

# QUIKLITTER™

REF #50-0442

## Multi-Use Disposable Litter

Red Handles

Rated to 500 lbs (226 kg)

Size: 72" x 27"

Weight: 16 oz



**RESCUE ESSENTIALS**

[www.rescue-essentials.com](http://www.rescue-essentials.com)

[info@rescue-essentials.com](mailto:info@rescue-essentials.com) | 910-830-0286



 Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials  
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



MedEnvoy Global B.V.  
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123 2595AM  
The Hague, The Netherlands



# QuikLitter™ Instrucciones de Uso

QuikLitter™ está calificado para transportar hasta 500 libras de peso (226 kg). Se recomienda utilizar al menos cuatro personas para garantizar un transporte y una transferencia segura, minimizando la posibilidad de accidentes o lesiones. No se recomienda su uso cuando la estabilidad espinal es un problema.

## CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

- No utilice QuikLitter™ si la unidad está excesivamente desgastada o perforada.
- Evite el contacto con objetos punzantes.
- Evite el arrastre de QuikLitter™ sobre superficies rugosas.
- No almacene QuikLitter™ en contacto con fuentes de calor superior a 88°C.
- No debe usarse junto con ningún tipo de elevadores mecánicos ni para movimientos verticales u horizontales.

## MANEJO DEL PACIENTE

- No exceda la capacidad de carga de 500 libras (226 kg).
- Utilice un mínimo de 4 personas para levantar al paciente.
- Asegúrese de que la técnica de agarre sea adecuada antes de levantar al paciente.


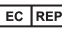







## LIMPIEZA

- Una vez sucio, el QuikLitter™ se puede limpiar utilizando un paño húmedo con jabón, detergente o un desinfectante suave.
- No lo lave en la lavadora.

## USO PREVISTO

El QuikLitter™ está diseñado para ser utilizado por profesionales de la salud para la estabilización, el transporte y la transferencia de pacientes en general. Debido a la construcción ligera y compacta del dispositivo, es especialmente útil en entornos austeros donde se necesitan evacuaciones rápidas de heridos.

*Aviso: Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con este dispositivo debe ser comunicado a Tri-Tech Forensics y a la Autoridad Competente del Estado Miembro en el que esté establecido el usuario y/o paciente.*

 MD	Medical Device	 EC REP	Authorized European Representative	 LOT	Lot Number	 PK	Country Code		Distributor
 LATEX	Not Made with Natural Rubber Latex		Manufacturer		Consult Instructions For Use		Date of Manufacture		