

QUIKLITTER™ LITE

REF #50-0469

Multi-Use Disposable Litter

Rated to 750 lbs (340 kg)

Size: 72" x 27" Weight: 13 oz



RESCUE ESSENTIALS

www.rescue-essentials.com

info@rescue-essentials.com | 910-830-0286



Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



EC REP

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33,
Suite 123 2595AM The Hague
The Netherlands



LOT



QuikLitter™ Lite Instrukcja

QuikLitter Lite™ jest przystosowany do transportu do 750 funtów (340 kg). Zaleca się używać w co najmniej cztery osoby, aby zapewnić bezpieczny transport i przenoszenie, minimalizując ryzyko wypadku lub obrażeń. Niezalecane, gdy jest problemem ze stabilnością kręgosłupa.

PRZECIWSKAZANIA I OSTRZEŻENIA

- Nie używaj QuikLitter™ Lite, jeśli urządzenie jest nadmiernie zużyte lub przebite.
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami.
- Unikaj przeciągania QuikLitter™ Lite po chropowatych powierzchniach.
- Nie przechowuj w kontakcie ze źródłami ciepła powyżej 190 stopni F.
- Nie stosować w połączeniu z żadnym typem podnośników mechanicznych do ruchu pionowego lub poziomego.

POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM

- Nie przekraczaj nośności 750 funtów.
- Do podnoszenia pacjenta potrzeba co najmniej 4 osób.
- Przed podniesieniem pacjenta należy zapewnić właściwą technikę chwytania.


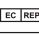






CZYSZCZENIE

- Zabrudzony QuikLitter™ Lite można czyścić wilgotną szmatką z mydłem, detergentem lub łagodnym środkiem dezynfekującym.
- Nie prać w palce.
- Jeśli całe urządzenie jest zanieczyszczone, umieść je w czerwonej torbie na zagrożenie biologiczne i zutylizuj zgodnie z protokołem postępowania z odpadów niebezpiecznych.

DOCELOWY UŻYTKOWNIK

Do użytku przez osoby udzielające pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych.

Uwaga: Każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z tym urządzeniem, powinien zostać zgłoszony do Tri-Tech Forensics i właściwy organ państwa członkowskiego, w którym użytkownik i / lub pacjent ma siedzibę.

 MD	Medical Device	 EC REP	Authorized European Representative	 LOT	Lot Number	 PK	Country Code
 LATEX	Not Made with Natural Rubber Latex		Manufacturer		Consult Instructions For Use		Date of Manufacture

RESCUE ESSENTIALS

www.rescue-essentials.com

910-830-0286 | info@rescue-essentials.com

01-1050R1